



QUICKCARE



KINSA APP



How to set up your Kinsa thermometer



STEP 1

Download the app

Search for “Kinsa” in your app store

Available in the App Store and Google Play!




Or scan this QR Code

Point your smartphone’s camera at the QR code to the right, and tap the link that appears.



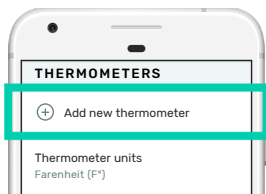

Once you’ve downloaded the Kinsa app, launch it to get started!



STEP 2

Connect thermometer to Kinsa app

Tap the setting gear  at the top right corner of your screen, and then tap **Add new thermometer**.

Follow the instructions on your screen to connect your thermometer via  Bluetooth.

DATA PRIVACY

You are in complete control of the data you share via the Kinsa app. Individual data will never be shared without your permission and anonymous data will only be reported in groups to help prevent the spread of illness. Read more about Kinsa’s privacy policy at <https://www.kinsahealth.co/privacy-policy/>.



Cómo configurar su termómetro



PASO 1

Descargar el app

Buscar la aplicación de “Kinsa” en la app store

Disponible en App Store y Google Play!




O escanear el Código QR

Apunta con tu cámara hacia el código QR a la derecha y luego abre el link que aparece.



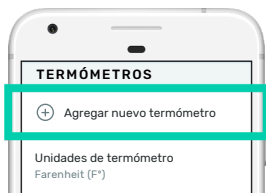

Una vez que haya descargado la aplicación de Kinsa, iníciela para comenzar.



PASO 2

Conecte el termómetro a la aplicación de Kinsa

Toca el engranaje de ajuste  en la esquina superior derecha de tu pantalla, y toca la opción **Agregar nuevo termómetro**.

Siga las instrucciones en la pantalla para conectar su termómetro via  Bluetooth.

PRIVACIDAD DE LOS DATOS

Usted tiene control total de los datos que comparte a través de la aplicación Kinsa. Los datos individuales nunca serán compartidos sin su permiso y los datos anónimos solo serán reportados en grupos para ayudar a prevenir la propagación de enfermedades. Lea más sobre la política de privacidad de Kinsa: <https://www.kinsahealth.co/privacy-policy/>.